

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. L'amplificateur auditif est un accessoire très utile au quotidien. Il vous permet d'augmenter le volume des sons qui vous entourent, afin de mieux comprendre les conversations et autres sons environnants : idéal pour les personnes atteintes d'une déficience auditive légère. Le microphone orientable fourni vous permet même de vous concentrer sur une discussion en particulier, sur la télévision ou autres sons de votre choix. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Amplificateur auditif
- Écouteurs avec microphone
- Microphone externe orientable
- Support pour le microphone orientable
- Dragonne
- Embouts d'écouteurs
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) : 1 pile AAA (1,5 V)




NOTE :

Il se peut que l'amplificateur de son soit livré avec un volume sonore réglé au maximum. Avant de mettre les écouteurs dans les oreilles, réduisez alors le volume en tournant le bouton de réglage du volume vers la gauche.

Description du produit

1. Œillet pour dragonne
2. Réglage aigus
3. Réglage basses
4. Prise casque (jack 3,5 mm)
5. Port microphone
6. Réglage de volume
7. Écouteurs
8. Microphone
9. Clip de maintien
10. Connecteur (jack 3,5 mm)

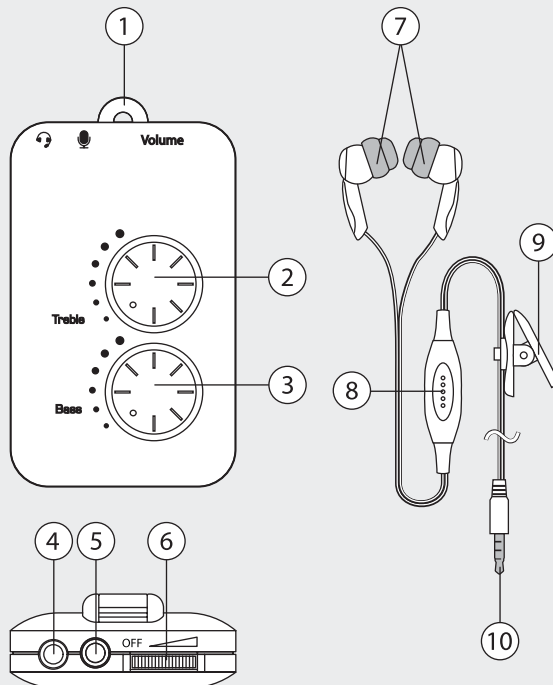

Installer la pile

Ouvrez le logement à pile situé au dos de l'appareil en poussant le couvercle dans le sens de la flèche. Insérez une pile AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment. Refermez le compartiment à pile.

Utilisation

1. Branchez le connecteur des écouteurs (10) au port correspondant (4).
2. Insérez les écouteurs dans vos oreilles.
3. Allumez l'amplificateur auditif en tournant le bouton de volume vers la droite. Vous pouvez sentir une légère résistance.
4. Ajustez le volume, les aigus et les basses selon vos besoins pour atteindre un confort d'écoute optimal.
5. Quand vous n'utilisez plus l'amplificateur auditif, éteignez-le en tournant le bouton de volume vers la gauche.



ATTENTION:

Des bruits soudains et puissants peuvent causer des dégâts auditifs irréversibles en cas de volume mal réglé. Réglez donc le volume avec prudence et sagesse.



NOTE:

Baissez le volume si vous entendez une réverbération (sifflement aigu et fort).

Utilisation du microphone orientable

Fixez le microphone orientable sur son support en plastique et dirigez-le vers la source sonore à amplifier. Branchez le connecteur du microphone dans le port prévu à cet effet à côté des écouteurs (5). Ajustez le volume, les aigus et les basses comme décrit plus haut.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ATTENTION:

L'utilisation d'écouteurs à un volume trop élevé peut entraîner des dégâts auditifs durables. Veillez donc à un réglage approprié du volume.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !

- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC5250 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtas, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.08.2015